



Hygiène
en milieu médical

Daily
PREMIUM

Klean' Wipe Des


Lingettes désinfectantes mains, surfaces et dispositifs médicaux* sans rinçage

PROPRIÉTÉS

Lingettes agréées contact alimentaire conçues pour désinfecter les mains, les surfaces (bureaux, souris, claviers...) ainsi que les dispositifs médicaux *non invasifs (stéthoscopes, électrodes, fauteuils roulants, lunettes...). Taille de la lingette : 13 x 18 cm | Non tissé standard blanc : Grammage 25g/m²

CONSEILS D'UTILISATION

Ôter le couvercle, et retirer l'opercule. Passer une lingette prise au centre de la bobine dans la fente du couvercle. Lingettes à usage unique prêtes à l'emploi - Utiliser dans les 30 jours après ouverture. Respecter un temps de contact selon la désinfection souhaitée. Appliquer sur l'ensemble de la zone à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire. Répéter l'application chaque fois que nécessaire. Bien refermer l'emballage après chaque ouverture. Ne pas réutiliser la lingette. La désinfection ne pourrait plus être garantie. NE PAS JETER LA LINGETTE DANS LES TOILETTES. Utiliser les biocides avec précaution, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

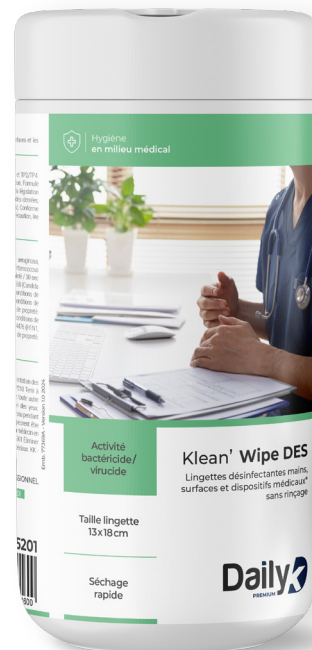

Réf. **555201**



VIRUCIDE
EN 14476

Fabriqué en France



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Spunlace non tissé
Couleur	Blanc
Parfum	Sans
pH	7
Contenance	100 lingettes

CONDITIONNEMENT

EAN	3700008300920
Colisage	Carton
Unités par carton	12 boîtes
Dimension d'un carton (mm)	335 x 225 x 251
Cartons par palette	90
Nombre de couches	6
Colis par couche	15
Unités par palette	1080



COMPOSITION INDICATIVE & NORME

Substances actives : Ethanol (CAS 64-17-5) : 65.8% (m/m).
Type de produit TP1 et TP2/TP4. Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) mise à disposition. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59. Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications). Conforme au règlement biocide (UE) n°528/2012 - TP1, TP2, TP4. Utiliser les biocides avec précaution, lire l'étiquette et les informations concernant le produit

CONSEILS DE PRUDENCE

DANGER. H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. Conseils de prudence (Phrases P) : P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P280 Porter un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. P501 Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

EFFICACITÉ BACTÉRICIDE

NORMES	SOUCHES	TEMPS
EN1276	Pseudomonas Aeruginosa Escherichia Coli Staphylococcus Aureus Enterococcus Hirae	1 minute <i>en condition de saleté</i>
EN13697	Pseudomonas Aeruginosa Escherichia Coli Staphylococcus Aureus Enterococcus Hirae	1 minute <i>en condition de saleté</i> 30 secondes <i>en condition de propreté</i>
EN1500	Escherichia Coli	30 secondes

EFFICACITÉ LÉVURICIDE

NORMES	SOUCHES	TEMPS
EN1650	Candida Albicans	1 minute <i>en condition de saleté</i>
EN13697		

EFFICACITÉ FONGICIDE

NORMES	SOUCHES	TEMPS
EN13697	Candida Albicans Aspergillus Basiliensis	5 minutes <i>en condition de saleté</i>
EN13624	Candida Albicans Aspergillus Basiliensis	1 minute <i>en condition de propreté</i>

EFFICACITÉ VIRUCIDE

NORMES	SOUCHES	TEMPS
EN14476	Virus de la Vaccine souche Ankara ATCC - VR1508	15 minutes <i>en condition de saleté</i>
EN14476	Coronavirus Humain 229E	30 secondes <i>en condition de propreté</i>
EN14476	H1N1 Norovirus Rotavirus	1 minutes <i>en condition de propreté</i>
EN16777	SARS - CoV-2	1 minutes <i>en condition de propreté</i>